

**TOPRO**  
STEP

# TREPPENSTEIGHILFE



Bis zu  
**€ 4.000**  
Zuschuss  
möglich\*

\*bei vorhandenem Pflegegrad

“ Seit ich den TOPRO Step habe, fürchte ich mich nicht mehr die Treppe zu gehen.

- Oddbjørn (68), nutzt TOPRO Step seit 2016

## Bleiben Sie aktiv und selbstständig

Für viele kann die Treppe eine Herausforderung oder Barriere im Alltag werden, jedoch ist die Treppe auch ein effektives Werkzeug, um sich weiterhin physisch aktiv und in Bewegung zu halten.

Die Folgen eines Treppensturzes können schwerwiegend sein und viele weigern sich daher Treppen zu gehen, besonders Alleinstehende. Jedes Jahr werden rund 600.000 Menschen in Deutschland aufgrund von Treppenstürzen medizinisch versorgt.

TOPRO Step ist ein mechanisches Produkt ohne Verwendung von Elektrizität. Es besteht aus einem Handlauf und einem Griff, der entlang des Handlaufs geschoben wird. Bei Schwindel oder Instabilität der Beine unterstützt der Handgriff bis die nächste Stufe sicher betreten werden kann. TOPRO Step bietet die extra Stütze und Sicherheit, die benötigt wird, um weiterhin die Treppe ohne Unterstützung nutzen zu können.





## Ein Handgriff; viele Möglichkeiten

TOPRO Step wird entsprechend der Körpergröße, sowie des Bedarfs des Nutzers, installiert. Der Handgriff von TOPRO Step ist ergonomisch geformt, bietet zwei Griffhöhen und kann problemlos mit dem Handlauf von ToproStep kombiniert werden. So findet sich für jeden Nutzer die passende Position zum Greifen.

Testen Sie es und finden Sie Ihren Favoriten:



- Eine Hand:**  
 TOPRO Step kann problemlos mit einer Hand benutzt werden, entweder mit links oder rechts, sowohl aufwärts als auch abwärts.



- Kombinieren Sie Handgriff und Handlauf:**  
 Benutzen Sie den Handlauf für mehr Stütze und Sicherheit, wenn Sie den Handgriff vor sich her schieben, sowohl auf- als auch abwärts.



- Greifen Sie den vertikalen Teil des Handgriffs:**  
 Beim Heruntergehen der Treppe bevorzugen einige es, den vertikalen Teil des Handgriffs zu nutzen.



## Für Groß und Klein

Mittlerweile wird TOPRO Step von Nutzern jeden Alters, Krankheit und/oder Verletzung benutzt. Darunter befinden sich unter anderem Senioren, Kinder, Schlaganfallpatienten, Personen mit Verletzungen, neurologischen Krankheiten und Nutzer mit langwierigen Krebserkrankungen. Alle Nutzer haben eines gemeinsam: Sie benötigen etwas Unterstützung und Sicherheit, um weiterhin selbstständig Treppen steigen zu können.

“ Es gibt viele, die Schwierigkeiten beim Treppengehen haben und die von TOPRO Step profitieren können. Das Treppensteigen kann nicht nur die Gehfunktion aufrecht erhalten, sondern eignet sich auch gut als Training.

- Zitat Martin Tjugen, Zeitschrift Ergotherapeuten, Februar 2017

Mit TOPRO Step wird die Treppe nicht mehr dafür ausschlaggebend sein, wo und wie man wohnen soll. Dies kann man nun selbst bestimmen. TOPRO Step ist über die TOPRO GmbH erhältlich. Kontaktieren Sie uns gerne bezüglich Zuschussmöglichkeiten, finanzieller Unterstützung sowie Absetzbarkeit. Wir unterstützen Sie gerne, sodass TOPRO Step auch für Sie einen Teil Ihres Alltags werden kann.



## Effektives Treppentraining

TOPRO Step wird u. a. von medizinischen Einrichtungen und Rehasentren benutzt. Der Handgriff von TOPRO Step kann beim Gangtraining hinter dem Anwender hergeschoben werden, wenn dieser eigenständig Treppen läuft. Somit verhindert TOPRO Step die Sturzgefahr. Mit TOPRO Step kann man das Treppentraining früher beginnen und Sturzsicherheit erlangen. So kann man sich besser darauf konzentrieren, den Anwender auf der Treppe anzuleiten und zu unterstützen.

Treppentraining ist auch zu Hause möglich. Menschen, die nach einem Sturz oder einer Verletzung trainieren, können mit TOPRO Step mehr Aktivität und Training in ihren Alltag bringen. TOPRO Step wurde u. a. bei vielen Schlaganfallpatienten installiert, sodass diese früher mit dem Treppensteigen beginnen können und nicht von Pflegepersonal abhängig sind, um sich in ihrem eigenen Zuhause frei bewegen zu können.

“ Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, da ich weiterhin aktiv bleibe.

- Guttorm (95), nutzt TOPRO Step seit 2017




Gehen Sie Ihre Treppe täglich  
**2 Mal für ein Jahr**  
besteigen Sie die Zugspitze




**In Skandinavien**  
entwickelt und produziert


### Lieferbar für:

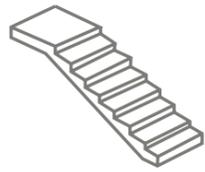

Gerade Treppen

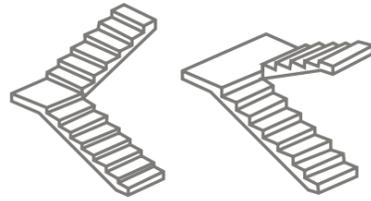

L & U-Treppen mit einem oder mehreren Podesten

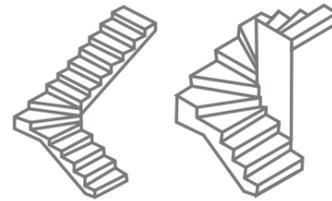

L & L & U-Kurventreppen (ohne Podest)

### Produktanforderungen:

**120 kg**  
maximales Nutzergewicht

**60 cm**  
minimale Breite der Treppe

**120-200 cm**  
empfohlene Körpergröße

**Alle Teile sind**  
Lagerware und werden bei Installation angepasst

## Kann TOPRO Step auf meiner Treppe installiert werden?

TOPRO Step kann einfach an die meisten Treppen angepasst werden, unabhängig vom Winkel, des Wandmaterials oder dem oberen und unteren Ende der Treppe. Da TOPRO Step aus Modulen, die wir auf Lager haben, zusammengebaut wird, ist die Lieferzeit nach der Bestellung kurz. Sie sollen nicht lange darauf warten müssen, sicher Treppen steigen zu können!

Die Lieferung beinhaltet einen regulären und robusten Handlauf, welcher einfach an der Wand montiert wird. Der Handlauf steht nur 10 cm von der Wand ab und

der eingeklappte Handgriff gerade einmal 18 cm. Daher bedarf es keiner Baugenehmigung, keinem Eingriff in die Bausubstanz und keinem großen Eingriff in Ihrem Zuhause, um TOPRO Step zu installieren. TOPRO Step ist nur für den Innengebrauch geeignet.

Unten sehen Sie Installationsbeispiele des TOPRO Steps und mögliche Lösungen für verschiedene Treppen, Wände und Platz am oberen und unteren Ende der Treppe, die man in den meisten Heimen in Deutschland findet.



L - Treppe m/Podest



L - Kurventreppe



U - Kurventreppe



Verlängerung oben: L - Kurventreppe - m/Pfosten

## Zusätzliche Funktionalität

Der Handgriff kann bei Nichtgebrauch problemlos eingeklappt werden. Auf diese Weise nimmt TOPRO Step keinen Platz auf der Treppe ein und ist für andere, die die Treppe nutzen, nicht im Weg. Dies geschieht durch Drücken des orangefarbenen Knopfes und das gleichzeitige Drücken der äußeren Seite des Handgriffs nach oben. Der Handgriff kann aus Sicherheitsgründen nur aufwärts eingeklappt werden.

Beim Ausklappen des Handgriffs rastet TOPRO Step automatisch ein und ist umgehend zum Gebrauch bereit. Möchten Sie eine Tasche oder Einkaufstasche zwischen den Etagen transportieren, kann man diese einfach am TOPRO Step befestigen. So können Sie sich darauf konzentrieren, sicher die Treppe zu gehen. TOPRO Step hat an beiden Seiten einen Haken, sodass man, sowohl beim Hinauf- als auch beim Herabgehen der Treppe, Dinge transportieren kann. Die Haken gehören nicht zur Grundausstattung und müssen separat angefragt werden.





Kontaktinformationen:

[www.toprostep.de](http://www.toprostep.de)

[kontakt@toprostep.de](mailto:kontakt@toprostep.de)

+49 8141 888939 - 0

TOPRO GmbH

Bahnhofstraße 26 d

82256 Fürstenfeldbruck

Deutschland